

「いびき」「睡眠時無呼吸症候群」を横向き睡眠に改善する

イビキ防止器

# いびかナイト

## 恐ろしいイビキ

イビキは他人の眠りを妨げるばかりでなく、ときには呼吸が10秒間以上止まって(睡眠時無呼吸)、血圧が上がったり、夜間の突然死を起こす原因となることもあります。

イビキの原因は・・・。


では、イビキの原因は仰向けに寝ると舌や口蓋垂(ノドチンコ)が、重さで垂れ下がり、気道を狭くして呼吸を妨げます。そのための摩擦音がいびきです。

ひどい状態では「睡眠時無呼吸症候群」にもなります。「いびかナイト」はこれを解消するために、横向きになって寝ていただくための習慣作りのいびき防止器です。




## 特徴

- 1角度センサーとバイブレーターの働きで使用者が仰向けになると、バイブレーターの振動で刺激を与えます。
- 2バイブレーターの振動は、寝返りを打てば直ぐ止まり、必要以上の刺激は与えません。
- 3イビキが恥ずかしいそのために旅行は・・・と躊躇していた方は寝巻の下に付ければもう心配はいりません。

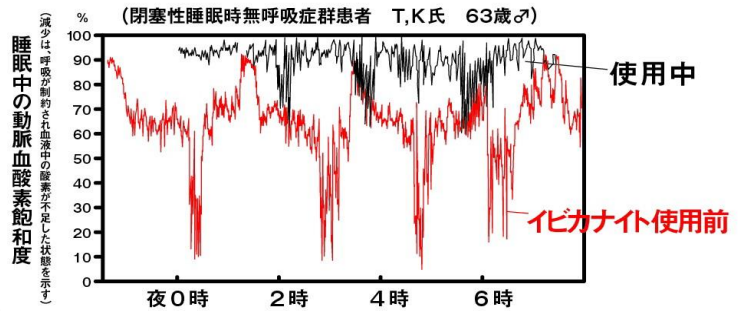

コメント及び資料提供 獨協医科大学 片山宗一名誉教授

## 横向き睡眠とイビキ・無呼吸の関係

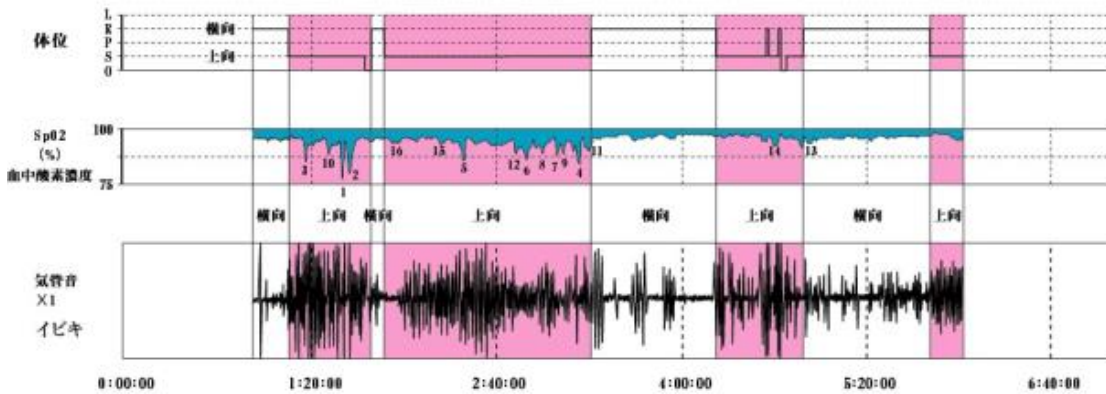

## 睡眠時無呼吸患者


### への使用経験

イビキの患者で睡眠中に呼吸が20~30秒以上止まると、動脈の血液中の酸素が減ってきて大変危険です。(赤線)

「いびかナイト」を用いると、無呼吸が少なくなり黒線の

## 機能

- |            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 1横向き指示機能   | 上向きになるとバイブレーターが振動。横向きになるよう指示を出します。   |
| 2寝返り可能機能   | 上を向いても30秒間は単なる寝返りは指示しません。            |
| 3最適指示強さ機能  | 睡眠の深さは人夫々。バイブレーターは初め弱く7段階で段々強く振動します。 |
| 4上向き睡眠可能機能 | 上向きで寝たい時は上向き状態でスイッチ「ON」にします。         |

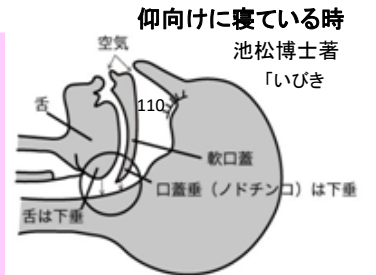

— 開発元 — アイキ産業株式会社

特許出願中

いびかナイト

価格 19,800円(税込)

— 取扱元 —

JEIC販売株式会社

東京都八王子市久保山町 2-36-4

TEL 042-659-3110

E-mail info@jeic-sa.jp

http://jeic-sa.jp

— 販売代理店 —